

КК Тазартқыш спрей

Қолдану нұсқаулығы



Есту аппараттарына арналған тазартқыш спрей






ҚОЛДАНЫЛУЫ: Есту аппаратын / құлақ қалыптамасын (құлаққапты) тазартады. Бүріккішті щетка ылғалданғанға дейін ақырын басыңыз. Қалыптаманың дыбыс шығу тесіктерін мұқият тазалаңыз. Сондай-ақ есту аппараттарыңызды тазартқыш спреймен (щетканың көмегімен) тазалай аласыз. Әсіресе сұйықтықтың құрылғының тесіктері мен ойықтарына түспеуін қадағалау маңызды. Шамамен 3 минут кептіріңіз. Содан кейін қалыптамаларды және аппараттарды құрғақ, талшық қалдырмайтын майлықпен сүртіңіз. Тазалау жиілігі — есту аппараты өндірушісінің ұсынымдарына сәйкес.

ҚҰРАМЫ: 5% натрий лауретсульфаты, 1% лимон майы, 1% каррагинан, метилизотиазолинон.

❖ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ: Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қолданар алдында жапсырмадағы ақпаратпен танысыңыз. Құрамында лимон майы бар. Аллергиялық (тері) реакция туғызуы мүмкін. Терінің тітіркенуі немесе бөртпе пайда болса: медициналық көмекке жүгініңіз. Дәрігер кеңесі қажет болса, бұйымның қаптамасын немесе жапсырмасын өзіңізбен бірге алыңыз. Спрей буларын жұтудан сақтаныңыз. Спрей қаптамасын және құрамын қалдықтарды қайта өңдейтін мамандандырылған кәсіпорынға қайта өңдеуге жіберіңіз.

Егер қолданар алдында қаптаманың зақымданғанын немесе өнімнің байқаусыз ашылғанын анықтасаңыз, қосымша нұсқаулық алу үшін бұйым сатып алынған дүкенге хабарласыңыз. Осы өнімді қолдануға байланысты болған кез келген елеулі оқиға туралы өндірушіге және құзыретті органдарға хабарлаңыз.

-  Бөлме температурасында сақтау
-  Құрғақ жерде сақтау
-  Тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпау
-  Ескерту белгісі

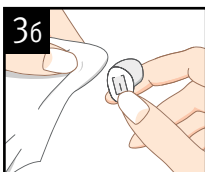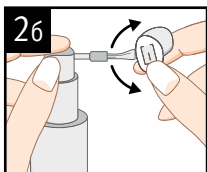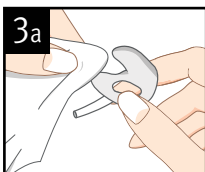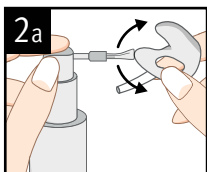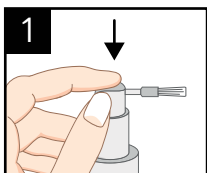

Импортёр в Республике Казахстан: ТОО «АУДИОТЕК»
010000, Астана, Район Есиль, УЛ. Сығанақ, 3Д. 43, Н.П. 9Б, Тел: +7 (7172) 550755

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa, Switzerland

Wake Up International B.V. Bergweg 49
3707 AA Zeist, The Netherlands, Tel.: +31 (0)30 6973240

HADEO
clean & care by HANSATON

ру Чистящий спрей

Инструкция по применению



Чистящий спрей для слуховых аппаратов

ПРИМЕНЕНИЕ: Очищает слуховой аппарат / ушной вкладыш. Аккуратно нажмите на распылитель, пока щёточка не станет влажной. Осторожно прочистите отверстия звукового выхода вкладыша. Вы также можете чистить свои слуховые аппараты с помощью чистящего спрея (щёточкой). Особенно важно следить, чтобы жидкость не попадала в отверстия и углубления устройства. Оставьте высыхать примерно на 3 минуты. Затем протрите ваши вкладыши и аппараты сухой безворсовой салфеткой. Частота очистки — согласно рекомендациям производителя слухового аппарата.

СОСТАВ: 5% лауретсульфат натрия, 1% лимонное масло, 1% каррагинан, метилизотиазолинон.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Хранить в недоступном для детей месте. Перед использованием ознакомьтесь с информацией на этикетке. Содержит лимонное масло. Может вызывать аллергическую (кожную) реакцию. В случае появления раздражения на коже или сыпи: обратитесь за медицинской помощью. Если требуется консультация врача, имейте при себе упаковку изделия или этикетку. Избегайте вдыхания паров спрея. Утилизируйте содержимое и упаковку на специализированном предприятии по переработке отходов.






Если перед использованием вы обнаружили, что упаковка повреждена или продукт был непреднамеренно открыт, обратитесь в магазин, где было приобретено изделие, для получения дальнейших инструкций. Пожалуйста, сообщайте о любом серьезном инциденте, произошедшем в связи с использованием данного продукта, производителю и компетентным органам.

 Хранить при комнатной температуре

 Хранить в сухом месте

 Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей

 Знак безопасности

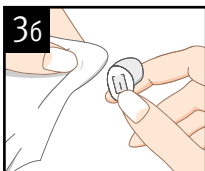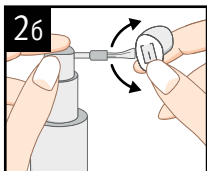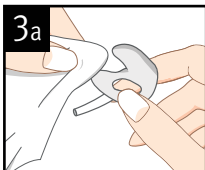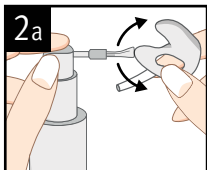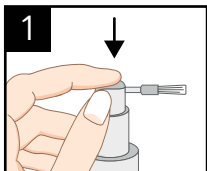

Импортёр в Республике Казахстан: ТОО «АУДИОТЕК»
010000, Астана, Район Есиль, УЛ. Сыганақ, ЗД. 43, Н.П. 9Б, Тел: +7 (7172) 550755

 Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa, Switzerland

 Wake Up International B.V. Bergweg 49
3707 AA Zeist, The Netherlands, Tel.: +31 (0)30 6973240

 **HADEO**
clean & care by HANSATON