



Есту аппараттарына арналған тазартқыш таблеткалар



ҚОЛДАНЫЛУЫ: Контейнердің $\frac{3}{4}$ бөлігін жылы сумен толтырып, тазартқыш таблетканы салыңыз. Құлақ қалыптамасын (дыбыс өткізгіш түтікті) есту аппаратынан ажыратыңыз да, қалыптамаларды дыбыс өткізгіш түтіктерімен бірге (бірақ есту аппаратының өзін емес!) перфорацияланған салғышқа орналастырып, тазалау ерітіндісіне батырыңыз. Кемінде 30 минутқа қалдырыңыз. Құлақ қалыптамаларын таза сумен шайып, содан кейін кептіріңіз. Таблетка бір реттік — тек бір рет қолданыңыз.

ҚҰРАМЫ: 40,5% натрий гидрокарбонаты, 19% калий пероксимоносульфаты, 16% лимон қышқылы, 14% натрий карбонаты, 9% полиэтиленгликоль, натрий метафосфаты, жалбыз майы, натрий бензоаты, индиго.

- ❗ **САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:** Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- ⚠️ **Қолданар алдында жапсырманы оқыңыз.** Терінің қатты күйігін және көздің ауыр зақымдануын тудырады. Құрамында жалбыз майы бар. Аллергиялық реакция туғызуы мүмкін. Медициналық кеңес қажет болса, өнімнің қаптамасын немесе жапсырмасын өзіңізбен бірге алыңыз. Қорғаныш қолғаптарын, қорғаныш киімді, көз бен бетке арналған қорғаныс құралдарын қолданыңыз. **КӨЗГЕ ТҮССЕ:** Бірнеше минут бойы сумен абайлап шайыңыз. Егер контактты линзалар болса және оңай алынатын болса, шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз. Дереву дәрігерге жүгініңіз. **ТЕРІГЕ (немесе шашқа) ТҮССЕ:** Ластанған киімді дереу шешіңіз. Теріні сумен шайыңыз немесе душ қабылдаңыз. Құлыпталған жерде сақтаңыз. Тазалау жиілігі — есту аппараты өндірушісінің ұсынымдарына сәйкес.

Егер қолданар алдында қаптаманың зақымданғанын немесе өнімнің байқаусыз ашылғанын анықтасаңыз, қосымша нұсқаулық алу үшін бұйым сатып алынған дүкенге хабарласыңыз. Осы өнімді қолдануға байланысты болған кез келген елеулі оқиға туралы өндірушіге және құзыретті органдарға хабарлаңыз.

- 15°C 25°C Бөлме температурасында сақтау
- Құрғақ жерде сақтау
- Тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпау
- ❗ Ескерту белгісі

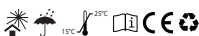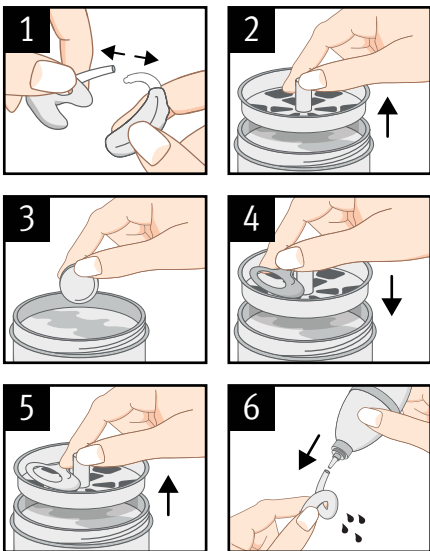

Импортёр в Республике Казахстан: ТОО «АУДИОТЕК»
010000, Астана, Район Есиль, УЛ. Сығанақ, 3Д. 43, Н.П. 9Б, Тел: +7 (7172) 550755

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa, Switzerland

Wake Up International B.V. Bergweg 49
3707 AA Zeist, The Netherlands, Tel.: +31 (0)30 6973240

HADEO
clean & care by HANSATON

РУ Чистящие таблетки

Инструкция по применению



Чистящие таблетки для слуховых аппаратов

ПРИМЕНЕНИЕ: Наполните контейнер на $\frac{3}{4}$ тёплой водой и добавьте очищающую таблетку. Отсоедините ушной вкладыш (звукотвод) от слухового аппарата и поместите вкладыши вместе со звукотводами (но не весь слуховой аппарат!) в перфорированную вставку и погрузите их в чистящий раствор. Оставьте замачиваться минимум на 30 минут. Промойте ушные вкладыши чистой водой и а затем высушите их. Таблетка одноразовая — использовать только один раз.

СОСТАВ: 40,5% гидрокарбонат натрия, 19% пероксимоносульфат калия, 16% лимонная кислота, 14% карбонат натрия, 9% полиэтиленгликоль, метафосфат натрия, масло перечной мяты, бензоат натрия, индиго.

- ⚠ **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Хранить в недоступном для детей месте.
- ⚠ **Перед применением прочитать этикетку.** Вызывает сильные ожоги кожи и серьёзные повреждения глаз. Содержит масло перечной мяты. Может вызвать аллергическую реакцию. При необходимости медицинской консультации иметь при себе упаковку или этикетку продукта. Использовать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты глаз и лица. **ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:** Осторожно промывать водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если они есть и их легко снять. Продолжить промывание. Немедленно обратиться к врачу. **ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы):** Немедленно снять всю загрязнённую одежду. Промыть кожу водой или принять душ. Хранить под замком. Частота очистки — согласно рекомендациям производителя слухового аппарата.






Если перед использованием вы обнаружили, что упаковка повреждена или продукт был непреднамеренно открыт, обратитесь в магазин, где было приобретено изделие, для получения дальнейших инструкций. Пожалуйста, сообщайте о любом серьёзном инциденте, произошедшем в связи с использованием данного продукта, производителю и компетентным органам.

15°C 25°C Хранить при комнатной температуре

Хранить в сухом месте

Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей

Знак безопасности

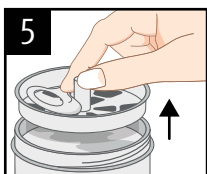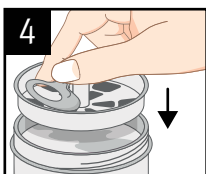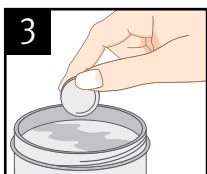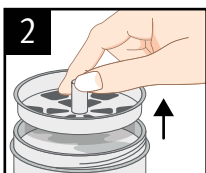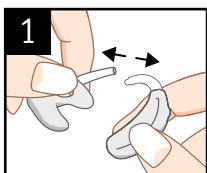

Импортер в Республике Казахстан: ТОО «АУДИОТЕК»
010000, Астана, Район Есиль, УЛ. Сығанақ, ЗД. 43, Н.П. 9Б, Тел: +7 (7172) 550755

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa, Switzerland

Wake Up International B.V. Bergweg 49
3707 AA Zeist, The Netherlands, Tel.: +31 (0)30 6973240

HADEO
clean & care by HANSATON