



Есту аппараттарына арналған тазартқыш майлықтар

ҚОЛДАНЫЛУЫ: Майлықты қаптамадан шығарыңыз. Алдымен беткі қабатты майлықпен мұқият сүртіп тазартыңыз; ерітіндіге бір минут әсер етуге мүмкіндік беріңіз, содан кейін құрғақ (қағаз) сүлгімен құрғатып сүртіңіз. Бір майлық шамамен 30 × 30 см көлемдегі беткей қабатты өңдеуге жеткілікті. Майлық бір реттік — тек бір рет қолданыңыз. Тазалау жиілігі — есту аппараты өндірушісінің ұсынымдарына сәйкес.

ҚҰРАМЫ: 1% лимон майы, кокамидопропилбетаин, 2-пропанол, 2-феноксиэтанол.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Хранить в недоступном для детей месте. Перед применением прочитать этикетку. Содержит лимонное масло. Может вызвать аллергическую кожную реакцию. При необходимости медицинской консультации иметь при себе упаковку или этикетку продукта. Избегать вдыхания пыли, дыма, газа, тумана/аэрозоля, паров. При необходимости медицинской консультации иметь при себе упаковку или этикетку продукта.



Егер қолданар алдында қаптаманың зақымданғанын немесе өнімнің байқаусыз ашылғанын анықтасаңыз, қосымша нұсқаулық алу үшін бұйым сатып алынған дүкенге хабарласыңыз. Осы өнімді қолдануға байланысты болған кез келген елеулі оқиға туралы өндірушіге және құзыретті органдарға хабарлаңыз.

 Бөлме температурасында сақтау

 Құрғақ жерде сақтау

 Тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпау

 Ескерту белгісі

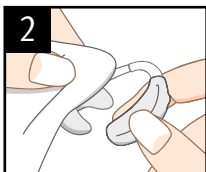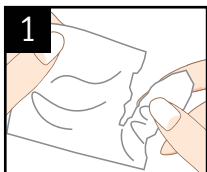

РУ Чистящие салфетки

Инструкция по применению



Чистящие салфетки для слуховых аппаратов

ПРИМЕНЕНИЕ: Извлеките салфетку из упаковки. Сначала тщательно очистите поверхность салфеткой; дайте раствору подействовать в течение одной минуты, затем вытрите насухо сухим (бумажным) полотенцем. Одной салфетки достаточно для обработки поверхности примерно 30 × 30 см. Салфетка одноразовая — использовать только один раз. Частота очистки — согласно рекомендациям производителя слухового аппарата.

СОСТАВ: 1% лимонное масло, кокамидопропилбетаин, 2-пропанол, 2-феноксиэтанол.

- ❖ **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Хранить в недоступном для детей месте. Перед применением прочитать этикетку. Содержит лимонное масло. Может вызвать аллергическую кожную реакцию. При необходимости медицинской консультации иметь при себе упаковку или этикетку продукта. Избегать вдыхания пыли, дыма, газа, тумана/аэрозоля, паров. При необходимости медицинской консультации иметь при себе упаковку или этикетку продукта.



Если перед использованием вы обнаружили, что упаковка повреждена или продукт был непреднамеренно открыт, обратитесь в магазин, где было приобретено изделие, для получения дальнейших инструкций. Пожалуйста, сообщайте о любом серьезном инциденте, произошедшем в связи с использованием данного продукта, производителю и компетентным органам.

 Хранить при комнатной температуре

 Хранить в сухом месте

 Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей

❖ Знак безопасности

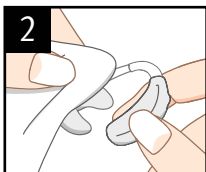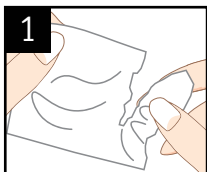

Импортёр в Республике Казахстан: ТОО «АУДИОТЕК»
010000, Астана, Район Есиль, УЛ. Сығанақ, ЗД. 43, Н.П. 9Б, Тел.: +7 (7172) 550755

 Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa, Switzerland

 Wake Up International B.V. Bergweg 49
3707 AA Zeist, The Netherlands, Tel.: +31 (0)30 6973240

 **HADEO**
clean & care by HANSATON