

КК Кептіруге арналған капсулалар

Қолдану нұсқаулығы



Есту аппараттарын кептіруге арналған капсулалар

ҚОЛДАНЫЛУЫ: Кептіру капсуласын қаптамадан шығарыңыз. Ашылмаған капсуланы кептіру контейнеріне картон жағымен жоғары қаратып салыңыз. Есту аппаратын өшіріп, батарея бөлігін ашыңыз, аппаратты контейнерге орналастырып, жабыңыз. Түнге қалдырыңыз. Капсуланы шамамен бір ай қолдануға болады; силикагель түйіршіктері ағарған кезде оны ауыстыру қажет.
ҚҰРАМЫ: 98% силикагель, 2% су.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ: Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

- ❗ Қолданар алдында жапсырманы оқыңыз. Бөлме температурасында сақтау / құрғақ жерде сақтау / тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпау.





Если перед использованием вы обнаружили, что упаковка повреждена или продукт был непреднамеренно открыт, обратитесь в магазин, где было приобретено изделие, для получения дальнейших инструкций. Пожалуйста, сообщайте о любом серьезном инциденте, произошедшем в связи с использованием данного продукта, производителю и компетентным органам.

15°C Бөлме температурасында сақтау

Құрғақ жерде сақтау

Тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпау

❗ Ескерту белгісі

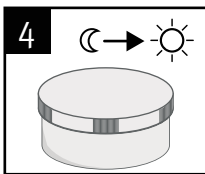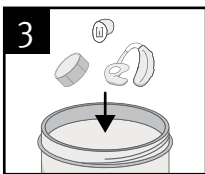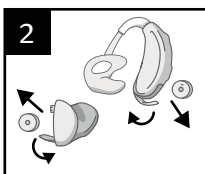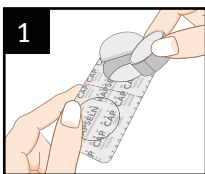

Импортёр в Республике Казахстан: ТОО «АУДИОТЕК»
010000, Астана, Район Есиль, УЛ. Сығанақ, 3Д. 43, Н.П. 9Б, Тел: +7 (7172) 550755

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa, Switzerland

Wake Up International B.V. Bergweg 49
3707 AA Zeist, The Netherlands, Tel.: +31 (0)30 6973240

HADEO
clean & care by HANSATON

РУ Капсулы для сушки

Инструкция по применению



Капсулы для сушки слуховых аппаратов

ПРИМЕНЕНИЕ: Извлеките капсулу для сушки из упаковки. Поместите нераспечатанную капсулу в контейнер для сушки картонной стороной вверх. Выключите слуховой аппарат и откройте батарейный отсек, поместите аппарат в контейнер и закройте его. Оставьте на ночь. Капсулу можно использовать примерно один месяц; её необходимо заменить, когда гранулы силикагеля посветлеют.

СОСТАВ: 98% силикагель, 2% вода.

- ❗ **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Хранить в недоступном для детей месте. Перед применением прочитать этикетку. Хранить при комнатной температуре / хранить в сухом месте / не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.






Если перед использованием вы обнаружили, что упаковка повреждена или продукт был непреднамеренно открыт, обратитесь в магазин, где было приобретено изделие, для получения дальнейших инструкций. Пожалуйста, сообщайте о любом серьезном инциденте, произошедшем в связи с использованием данного продукта, производителю и компетентным органам.

15°C 25°C Хранить при комнатной температуре

☂ Хранить в сухом месте

☀ Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей

❗ Знак безопасности

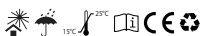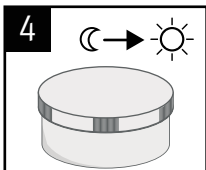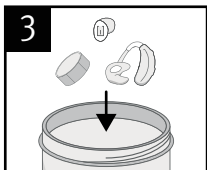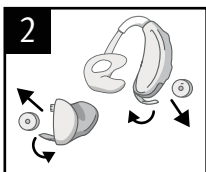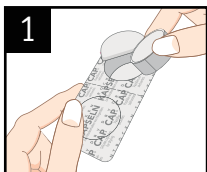

Импортер в Республике Казахстан: ТОО «АУДИОТЕК»
010000, Астана, Район Есиль, УЛ. Сыганақ, ЗД. 43, Н.П. 9Б, Тел: +7 (7172) 550755

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa, Switzerland

Wake Up International B.V. Bergweg 49
3707 AA Zeist, The Netherlands, Tel.: +31 (0)30 6973240

HADEO
clean & care by HANSATON