

KK Есту аппараттарына арналған күтім

ЖИЫНТЫҒЫ



Қолдану нұсқаулығы

Есту аппараттарына арналған тазартқыш майлықтар

ҚОЛДАНЫЛУЫ: Майлықты қаптамадан шығарыңыз. Алдымен беткі қабатты майлықпен мұқият сүртіп тазартыңыз; ерітіндіге бір минут әсер етуге мүмкіндік беріңіз, содан кейін құрғақ (қағаз) сүлгімен құрғатып сүртіңіз. Бір майлық шамамен 30 x 30 см көлемдегі беткей қабатты өңдеуге жеткілікті. Майлық бір реттік — тек бір рет қолданыңыз. Тазалау жиілігі — есту аппараты өндірушісінің ұсынымдарына сәйкес.

ҚҰРАМЫ: 1% лимон майы, кокамидопропилбетаин, 2-пропанол, 2-феноксиэтанол.




❗ **САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:** Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қолданар алдында жапсырманы оқыңыз. Құрамында лимон майы бар. Аллергиялық тері реакциясын тудыруы мүмкін. Медициналық кеңес қажет болса, өнімнің қаптамасын немесе жапсырмасын өзіңізбен бірге алыңыз. Шанды, түтінді, газды, тұманды/аэрозольді, буларды жұтудан сақтаныңыз. Медициналық кеңес қажет болса, өнімнің қаптамасын немесе жапсырмасын өзіңізбен бірге алыңыз.

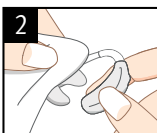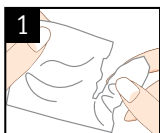

Кептіруге арналған капсулалар

ҚОЛДАНЫЛУЫ: Кептіру капсуласын қаптамадан шығарыңыз. Ашылмаған капсуланы кептіру контейнеріне картон жағымен жоғары қаратып салыңыз. Есту аппаратын өшіріп, батарея бөлігін ашыңыз, аппаратты контейнерге орналастырып, жабыңыз. Түнге қалдырыңыз. Капсуланы шамамен бір ай қолдануға болады; силикагель түйіршіктері ағарған кезде оны ауыстыру қажет. **ҚҰРАМЫ:** 98% силикагель, 2% су.

❗ **САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:** Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қолданар алдында жапсырманы оқыңыз. Бөлме температурасында сақтау / құрғақ жерде сақтау / тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпау.

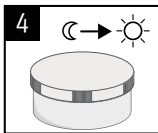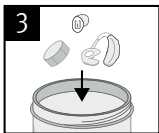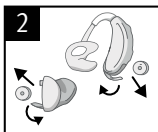

Ауа үрлегіш (груша)

ҚОЛДАНЫЛУЫ: Құлақ қалыптамасы мен дыбыс өткізгіш түтіктен барлық сұйықтықты үрлеп шығарыңыз.

❗ **САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:** Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.




15°C 25°C
❗ Бөлме температурасында сақтау

☂ Құрғақ жерде сақтау

☀ Тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпау

❗ Ескерту белгісі

Егер қолданар алдында қаптаманың зақымданғанын немесе өнімнің байқаусыз ашылғанын анықтасаңыз, қосымша нұсқаулық алу үшін бұйым сатып алынған дүкенге хабарласыңыз. Осы өнімді қолдануға байланысты болған кез келген елеулі оқиға туралы өндірушіге және құзыретті органдарға хабарлаңыз.

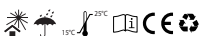

Импортёр в Республике Казахстан: ТОО «АУДИОТЕК»
010000, Астана, Район Есиль, УЛ. Сығанақ, 3Д. 43, Н.П. 9Б, Тел.: +7 (7172) 550755

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa, Switzerland

Wake Up International B.V. Bergweg 49
3707 AA Zeist, The Netherlands, Tel.: +31 (0)30 6973240

HADEO
clean & care by HANSATON

РУ Набор для ухода за слуховыми аппаратами



Инструкция по применению

Чистящие салфетки для слуховых аппаратов

ПРИМЕНЕНИЕ: Извлеките салфетку из упаковки. Сначала тщательно очистите поверхность салфеткой; дайте раствору подействовать в течение одной минуты, затем вытрите насухо сухим (бумажным) полотенцем. Одной салфетки достаточно для обработки поверхности примерно 30 × 30 см. Салфетка одноразовая — использовать только один раз. Частота очистки — согласно рекомендациям производителя слухового аппарата.

СОСТАВ: 1% лимонное масло, кокамидопропилбетаин, 2-пропанол, 2-феноксиэтанол.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Хранить в недоступном для детей месте. Перед применением прочитать этикетку. Содержит лимонное масло. Может вызвать аллергическую кожную реакцию. При необходимости медицинской консультации иметь при себе упаковку или этикетку продукта. Избегать вдыхания пыли, дыма, газа, тумана/аэрозоля, паров. При необходимости медицинской консультации иметь при себе упаковку или этикетку продукта.



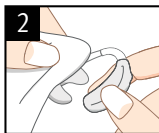
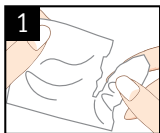


Капсулы для сушки слуховых аппаратов

ПРИМЕНЕНИЕ: Извлеките капсулу для сушки из упаковки. Поместите нераспечатанную капсулу в контейнер для сушки картонной стороной вверх. Выключите слуховой аппарат и откройте батарейный отсек, поместите аппарат в контейнер и закройте его. Оставьте на ночь. Капсулу можно использовать примерно один месяц; её необходимо заменить, когда гранулы силикагеля посветлеют.

СОСТАВ: 98% силикагель, 2% вода.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Хранить в недоступном для детей месте. Перед применением прочитать этикетку. Хранить при комнатной температуре / хранить в сухом месте / не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

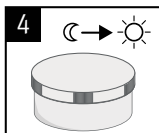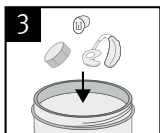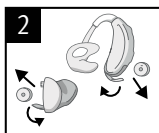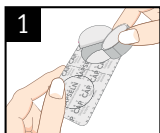

Воздушная груша

ПРИМЕНЕНИЕ: Выдуйте всю жидкость из ушного вкладыша и звуковода.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Хранить в недоступном для детей месте.



15°C Хранить при комнатной температуре

Хранить в сухом месте

Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей

Знак безопасности

Если перед использованием вы обнаружили, что упаковка повреждена или продукт был непреднамеренно открыт, обратитесь в магазин, где было приобретено изделие, для получения дальнейших инструкций. Пожалуйста, сообщайте о любом серьезном инциденте, произошедшем в связи с использованием данного продукта, производителю и компетентным органам.



Импортер в Республике Казахстан: ТОО «АУДИОТЕК»

010000, Астана, Район Есиль, УЛ. Сыганак, ЗД. 43, Н.П. 9Б, Тел.: +7 (7172) 550755

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa, Switzerland

Wake Up International B.V. Bergweg 49
3707 AA Zeist, The Netherlands, Tel.: +31 (0)30 6973240

HADEO
clean & care by HANSATON